



VETERTEST


CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

INSTRUCTIVO ENVÍO DE MUESTRAS

HEMATOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

- Solicita tubos para recolección de muestras en nuestro Laboratorio.
- Respeta el volumen de muestra indicado por el fabricante en cada tubo.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante de la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.
- Conservar en temperatura de refrigeración; 2°C – 8°C.
- No congelar.
- Evitar contacto directo con gel pack.

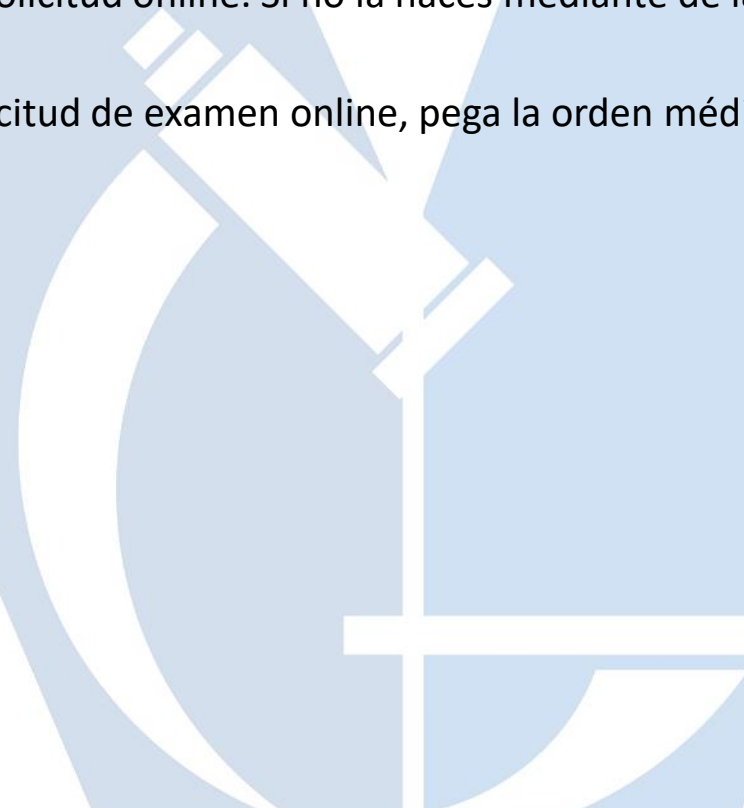

HEMATOLOGÍA

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO
Hemograma completo mamíferos	Sangre	EDTA
Hemograma completo peces, aves y reptiles	Sangre	EDTA
Hematocrito	Sangre	EDTA
Reticulocitos	Sangre	EDTA
Fibrinógeno (precipitación por calor)	Sangre	EDTA
Compatibilidad sanguínea	Sangre	EDTA
Test tipificación sanguínea (caninos y felinos)	Sangre	EDTA

HEMATOLOGÍA

PRUEBAS DE COAGULACIÓN

ANÁLISIS	MUESTRA	TUBO
TP	Sangre	CITRATO
TTPA	Sangre	CITRATO